



“Din experienta mea, toti pacientii tratati cu eTwo au rezultate remarcabile si imediate: textura pielii este imbunatatita, tenul are mai multa luminozitate si este mai prospat. Intreaga fata este reintinerita.”

Brian Biesman, M.D.  
F.A.C.S. Tennessee


# eTwo™


## Rezultate vizibile inca de la prima sedinta

Noul aparat etwo, cu o putere mai mare, detine protocoale combinate de tratament Sublime si Sublative pentru o rejuvenare completa, intr-un timp mai scurt, cu mai putine sedinte.

## Sistem de Rejuvenare Completa

- Sublime™ foloseste tehnologia elōs ce combina sigur si eficient nivelele de lumina infrarosie si radio frecventa bi-polară pentru remodelarea dermului profund stimuland totodata productia de colagen.
- Sublative™ tehnologie pe baza de radio frecventa bi-polară fractionala ce directioneaza caldura energiei eficient, in straturile superioare ale dermului unde produc o crestere semnificativa a colagenului. Rupturile epidermale fiind minime.

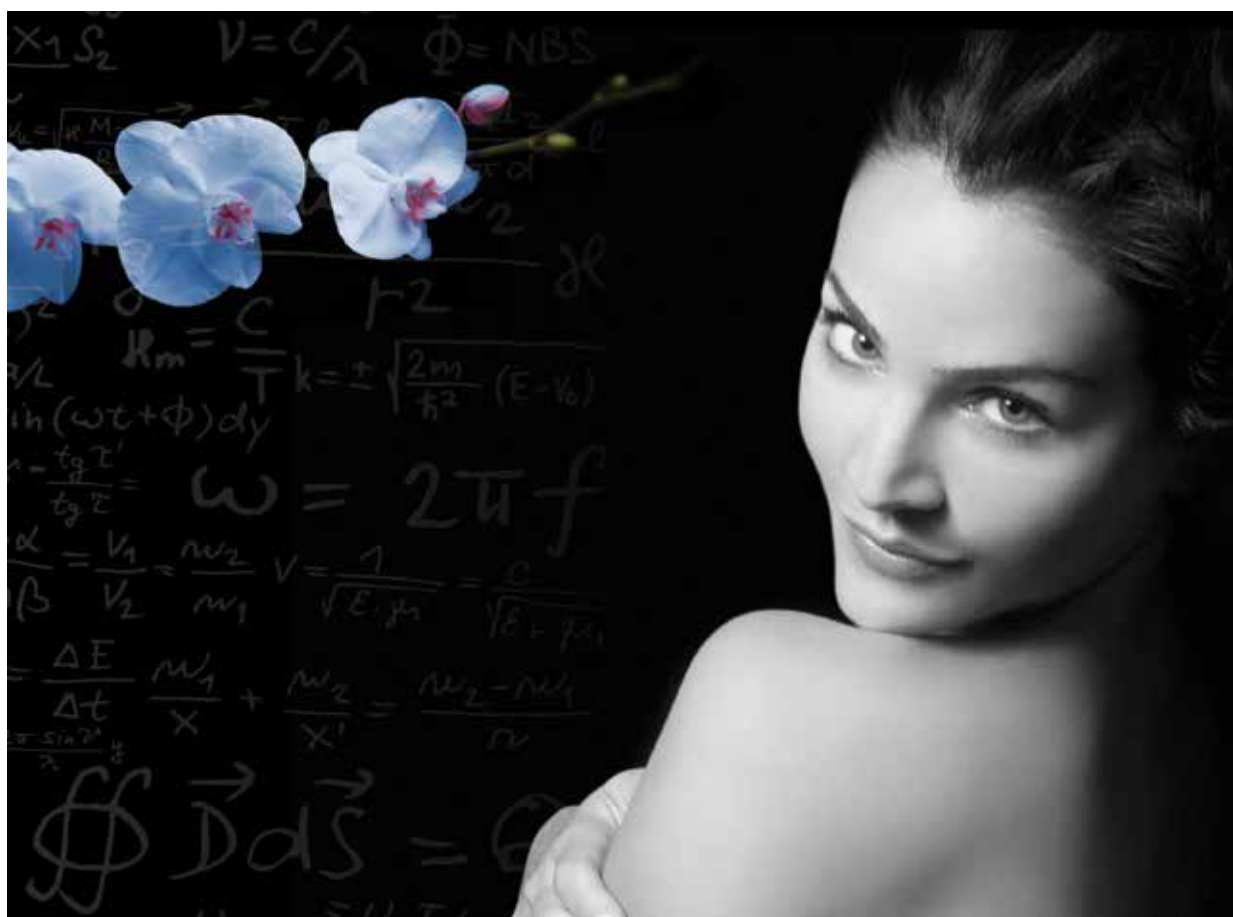

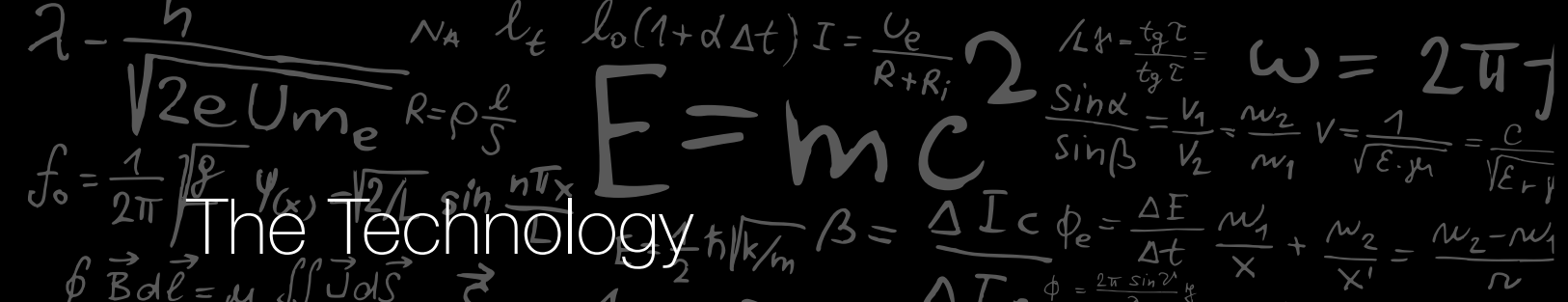

## Sublime & Sublative: Avantajul Versatil

Incalzirea controlata a stratului dermal profund stimuleaza si repara fibrele de colagen vechi. Rezultatul fiind imbunatatirea conturului facial, estomparea liniilor fine si ridurilor.

Aplicatorul ergonomic unic al Sublative conduce radio frecventa bi-polară prin matricea de electrozi a dispozitivului fractional. Livrarea fractionala a RF cauzeaza leziuni ablativă micro-epidermale. Acestea initiaza un proces puternic si rapid de vindecare a tesutului. Tesutul cel mai putin afectat din jurul punctelor matricei poate fi stimulat de caldura ce accelereaza procesul de vindecare. Pielea va deveni catifelata, fina si reintinerita.

Tratamentul de reintinerire sublativa actioneaza si trateaza: riduri, cicatrici, iregularitati texturale, leziuni superficiale si vergeturi.

## Tratamentul combinat Sublime & Sublative



### Sublime



### Sublative



# Rezultate vizibile in timp record

Rezultate maxime in timp rapid si costuri minime pe tratament face ca aceasta terapie sa fie cea mai cautata metoda pentru reintinerirea faciale. Pacientii solicita din ce in ce mai des acest tratament pentru a-si imbunatati aspectul pielii.

Sistemul eTwo iti permite sa te adresezi unei palete mai mari de cereri adaugandu-ti totodata in portofoliul de terapii o alternativa non-invaziva de tratare a ridurilor.

- Sistemul Intelligent de Feedback asigura informatii in timp real despre conditia pielii, impedanta si energia livrata la fiecare puls.
- Timp de recuperare minim pentru ca pacientii sa revina rapid la activitatile cotidiene.
- Sigur si eficient pentru toate tipurile de piele
- Tratamente rapide: cca 1 ora, in functie de zona de tratament, atat pentru Sublime cat si pentru Sublative
- Protocol de tratament scurt: Imbunatatiri vizibile dupa prima sedinta.
- Usor de transportat, compact, platforma multi-aplicatoare.

## Sublative iD™

### Optiuni multiple de tratament, Rezultate Exceptionale

Imbanatatest semnificativ textura si fermitatea pielii, ridurile sunt estompate, iar cicatricile sunt diminuate cu noul aplicator Sublative iD.

1. Capete Inteligente pentru maximizarea optiunilor de tratament si rezultatelor.
2. Reconectabile pe tratament
3. Configuratii multiple pentru capete

#### 64 pini

1. Rejuvenare Sublative Rapida pentru imbunatatirea tonusului cutanat si texturii.
2. Configuratii multiple pentru diferite protocoale de tratament

#### 44 pini

1. Geometria optima a electrodului pentru zone mici si tratament focusat pe ridurile peri-orbitale si peri-orale.
2. Tratament focusat pe cicatrici post-acneice, laxitatea pielii de sub ochi si ridurile de pe frunte.




Sublative iD Standard 64 pini



Sublative iD Focal 44 pini

## Specificatii Sistem

Energia Sublative	Pana la 100 mJ/pin
Energia Sublime	Pana la 200 J/cm <sup>3</sup>
Marimea Spotului Sublime	12 x 8 mm
Marimea Spotului Sublative iD	Standard 64 - 12 x 12 mm Focal 44 - 11 x 3 mm
Consumabil Sublative iD	Standard 64 pana la 400 pulsuri Focal 44 pana la 200 pulsuri
Interfata User	15" Ecran tactil
Dimensiuni Sistem	53 x 30 x 40 cm 21.8" x 11.8" x 15.7"
Greutate Sistem	8.5 kg / 18.7 lbs
Electricitate	100-240 VAC; 3A; 50-60 Hz

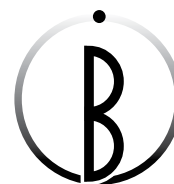

BeautyMed

successful solution

Str. Banu Dumitrache nr. 51  
sector 2, București  
Tel/Fax: +40-213.223064  
www.beautymed.ro